



Labormöbel



SONATION FLOW CONTROL

EFFIZIENT - SICHER - KOMFORTABEL

Das durchdachte Sicherheitssystem für Ihre Flüssigkeiten

Bei vielen Arbeitsprozessen entstehen **schädliche Lösemittelabfälle**, die Brand- und Explosionsgefahr im Labor erhöhen und ein **Gesundheitsrisiko** für das Personal darstellen. Eine sichere und kontrollierte Entsorgung ist daher essenziell. Das FlowControl System sorgt für einen geschlossenen, dichten Kreislauf – von der Entnahme bis zur **gefährlosen Entsorgung**. Es verhindert das Austreten giftiger Dämpfe und Flüssigkeiten und ermöglicht durchdachte Sicherheitslösungen für einen effizienten Laborbetrieb.

Dank präziser Fittings, Stufenoliven und eines praktischen Verteilkörpers lassen sich Schläuche und Kapillaren sicher und ohne Verzwirbelungen anschließen, sodass verbrauchte Eluenten **zuverlässig** in die Sammelbehälter geleitet werden.

In Kombination mit unserem **Laborgerätetisch der HPLC-Serie**, der eine ideale Grundlage für Ihre Laborgeräte schafft, gewährleistet das FlowControl-System eine **komfortable und sichere Arbeitsumgebung**.



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Kompatibel mit unterschiedlichsten Schlauchdurchmessern

Zusätzlich sorgen verschiedene Waste Caps, ausgestattet mit Fittings, Schläuchen und Belüftungsventilen, für einen **sicheren Transfer**, eine **effiziente Entsorgung** und eine **zuverlässige Filterung** von Lösungsmitteln. Diese Produkte tragen zur Erhöhung der Laborsicherheit bei und unterstützen die **Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards**.



Einfache Montage

Leicht installierbar und erweiterbar

Dank eines **durchdachten Montagesystems** lässt sich dieses System problemlos in nahezu allen Varianten unseres HPLC-Tisches integrieren, wobei Zubehörleisten und Auszugschienen die Montage **besonders einfach** von der Hand gehen lassen.

So ist Ihr System **ohne großen Aufwand** rundum für den Arbeitseinsatz vorbereitet.



Unsere drei Bundlesysteme - Basic | Advanced | Pro

In der **Basic Ausführung** ist eine ausziehbare Wanne inklusive zwei Kanister enthalten. Durch ein mitgeliefertes Waste Cap LC ist der feste sowie dichte Anschluss von Schläuchen und Kapillaren gewährleistet.


Das **Advanced Bundle** enthält zusätzlich zu der ausziehbaren Wanne und den zwei Kanistern ein Waste Cap für den Anschluss des mitgelieferten Wellschlauchs und des Absperrhahns. Ein kompakter Sammelanschluss (Multiport), der mittels einer Gehäusebox an dem Tisch befestigt wird und bei dem alle Anschlüsse seitlich angeordnet sind, um die Schläuche knickfrei anzuschließen, ist auch enthalten. Durch schräg angesetzte Anschlussgewinde wird das Gefälle verbessert, wodurch der Abfluss und Rückstau vermieden werden.

Die **Pro Ausführung** ergänzt die Gehäusebox des Advanced Bundles um die optische und visuelle Alarmierung zum rechtzeitigen Behältertausch mittels einer Display Box. Über diese wird der Behälterstatus durch farbige LEDs angezeigt. Das Touchoberfläche gewährleistet eine einfache Bedienung. Ein spezielles Waste Cap überwacht und meldet den vollen Behälter an die Display Box.

Basic



Advanced

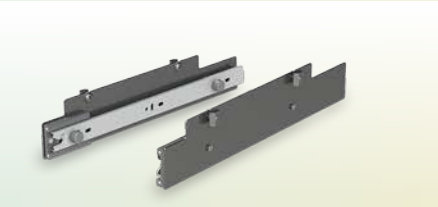

Pro



Zubehör

Wir bieten praktisches Zubehör an, das Materialien, Werkzeuge und Stifte sicher aufbewahrt und jederzeit griffbereit hält.

Auffangschale



Kleine Auffangschale bietet zusätzlichen Ablageplatz

Ablagefläche



Zusätzlich Abstellfläche die Inhalte sicher aufbewahrt

Magnethalter



Zur Aufbewahrung von Werkzeugen und magnetisierbarer Kleinteile



IMPROVE YOUR SCIENCE



SONATION GMBH
ALTE SCHULSTRASSE 39
DE-88400 BIBERACH

TEL.: +49 (0) 7351 80093-0
E-MAIL: MAIL@SONATION.COM
WWW.SONATION.COM